



RESPALDOS Y ACCESORIOS




Resistente carcasa de aluminio



Insert de Flotación de Aire ajustable



Funda lavable

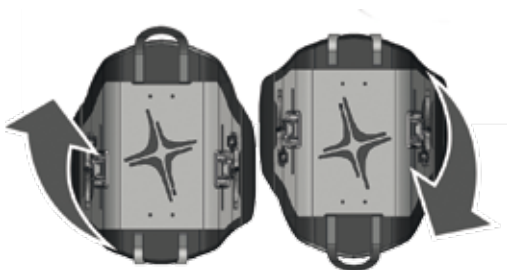


El respaldo ROHO Agility es la mezcla perfecta de características innovadoras que proporcionan a los usuarios de sillas de ruedas apoyo cómodo sin sacrificar la función. Están diseñados para adaptarse prácticamente a cualquier silla de ruedas y, una vez instalado, se mantiene seguro y en posición.

Es el único sistema que ofrece tecnología de flotación de aire Roho integrado en la parte posterior. El pad de celdas de aire es ajustable y puede ser personalizado para el nivel de comodidad del paciente o cambios de postura. Tiene la capacidad de voltearse para adaptarse a diversas formas del cuerpo ya sea en la parte superior para apoyar el ancho de los hombros o la parte inferior para apoyar las caderas. Es duradero, seguro, estable y removible. Fácil de usar y de ajustar.


RESISTENTE

El hardware de Zytel proporciona una excelente relación peso/resistencia. Zytel, producto de Dupont es apreciado por su alta resistencia mecánica y sus propiedades resistentes a las llamas, químicos y abrasivos.

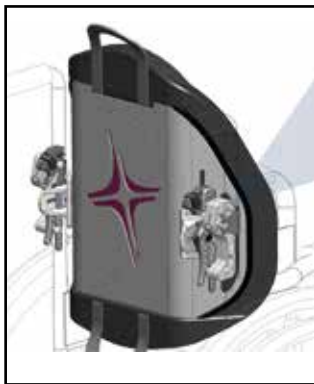

CONFORTABLE

Los respaldos ROHO Agility están diseñados para ser ligeros y para ajustarse a los cuerpos de sus clientes. El respaldo Agility integra la tecnología de flotación de aire de ROHO, que es totalmente ajustable para adaptar el volumen de aire al nivel de confort requerido.

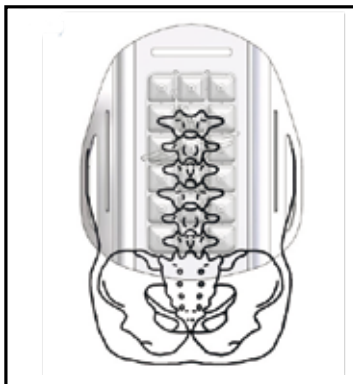


AJUSTABLE

Nuestro hardware exclusivo sujeta rápidamente y permite ajustes rápidos: hasta 10 cm de altura y 2,5 cm de profundidad. Fácilmente ajustable en ángulo y profundidad, incluso cuando el usuario está sentado en la silla de ruedas. Lo único que necesitará es una herramienta para asegurar el apoyo postural ideal y posicionamiento.

El respaldo Agility cuenta con un único punto de ajuste de 15° de inclinación posterior y anterior. Los respaldos están disponibles con dos opciones de accesorios de hardware ajustable.

Ambas opciones pueden ser ajustadas de la misma manera una vez instalado.

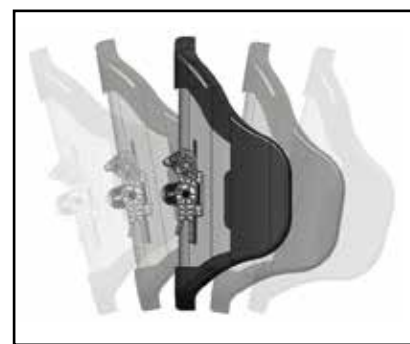

RESPALDO AGILITY CONTORNO MINIMO DE 5 CM

Recomendado para las personas:

- Que requieren apoyo postural básico.
- Que son usuarios de sillas de ruedas independientes.
- Que tienen buen control del tronco.

Modelos:

- Espuma con apoyo lumbar.
- Aire con apoyo lumbar.

Dimensiones:

- Ancho 35, 40, 45 y 50 cm.
- Espuma: 6,5 cm.
- Espuma/Aire: 7,5 cm.
- Altura: 25,5 cm a 45,5 cm.

RESPALDO AGILITY CONTORNO MEDIO DE 7.5 CM

Recomendado para las personas:

- Que requieren apoyo postural.
- Que son un tanto dependientes con transferencias.
- Que necesitan un mínimo control del tronco.

Modelos:

- Aire con apoyo lumbar.

Dimensiones:

- Ancho Ancho 35, 40, 45 y 50 cm.
- Altura: 25,5 cm a 51 cm.

RESPALDO AGILITY CONTORNO MAXIMO DE 15 CM

Recomendado para las personas:

- Que requieren un apoyo postural básico significativo.
- Que son usuarios de sillas dependientes con transferencias.
- Que necesitan el máximo control del tronco.

Modelos:

- Aire con apoyo lumbar (incluye pads laterales de aire ajustables).

Dimensiones:

- Ancho 35, 40, 45 y 50 cm.
- Altura: 40,5 cm a 51 cm.

SOPORTE LATERAL

Soporte de tronco fijo o rebatible.

Diseñados para mejorar el control de tronco y posicionamiento.



APOYACABEZA

Se ajusta en varias posiciones tanto verticalmente como horizontalmente.

Medidas disponibles: small, medium y large.



Garantía

Estructura de respaldo y hardware: 36 meses de Garantía Limitada. Inserción de aire: 18 meses de Garantía Limitada.