

# ROHO® Hybrid Select

Mejor Posicionamiento con protección de la piel comprobada



permobil

# Almohadón híbrido de avanzada con posicionamiento superior

El área de apoyo pélvico se ajusta a los cambios de forma, peso y posición. Las celdas de aire ROHO y el insert de Tuberosidades Isquiáticas utilizan el sistema de control de memoria ISOFLO® que permite encontrar y establecer la posición correcta fácilmente.




Control de memoria ISOFLO de 3 zonas para posicionamiento ajustable



ROHO<sup>®</sup>  
HYBRID SELECT  
permobil




**Nueva celda ROHO única**  
diseñada para la protección de la piel  
e inmersión

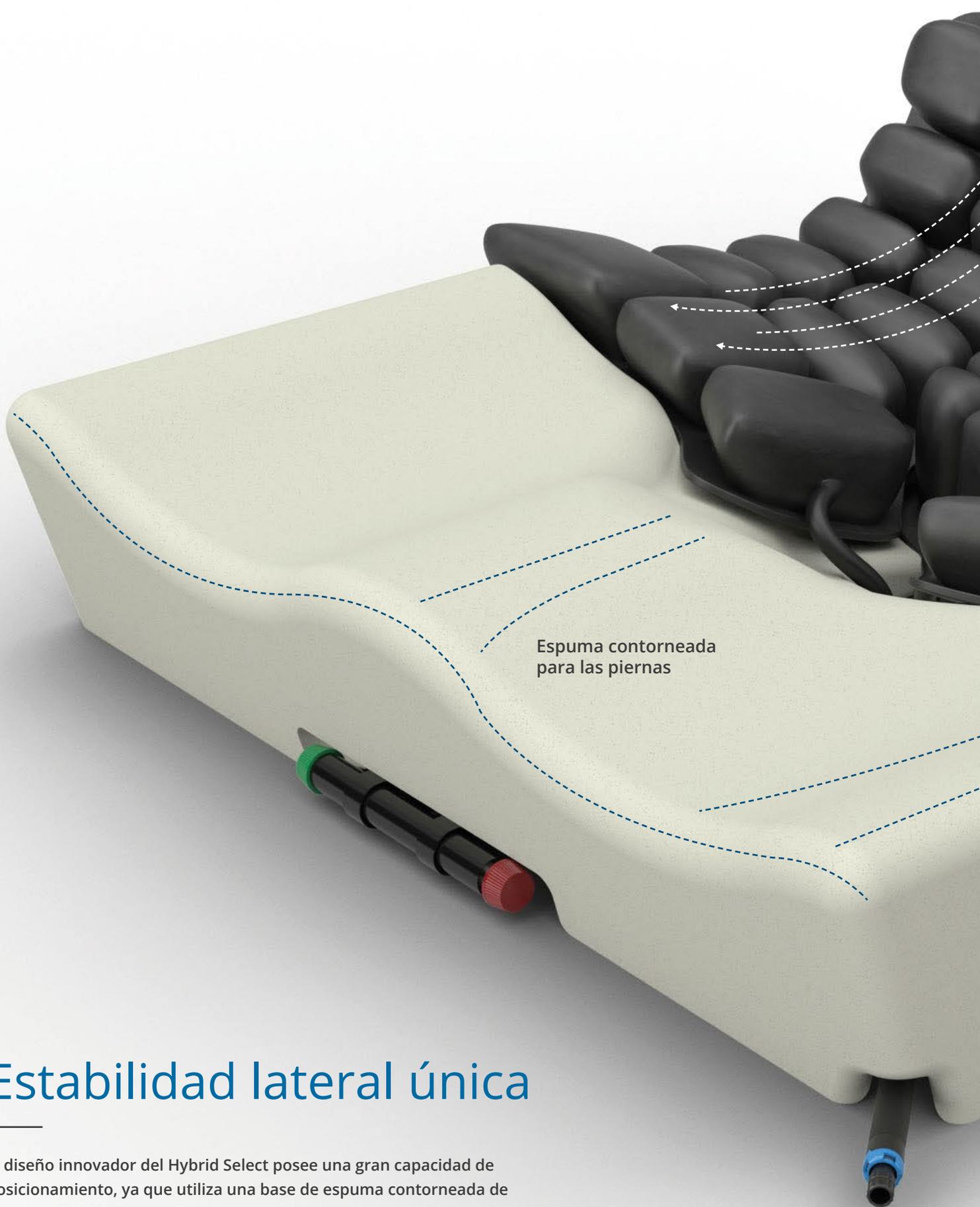

Espuma contorneada  
para las piernas

## Estabilidad lateral única

El diseño innovador del Hybrid Select posee una gran capacidad de posicionamiento, ya que utiliza una base de espuma contorneada de alta elasticidad, ofreciendo apoyo para las piernas, estabilidad lateral y proporcionando alivio de presión al coxis.

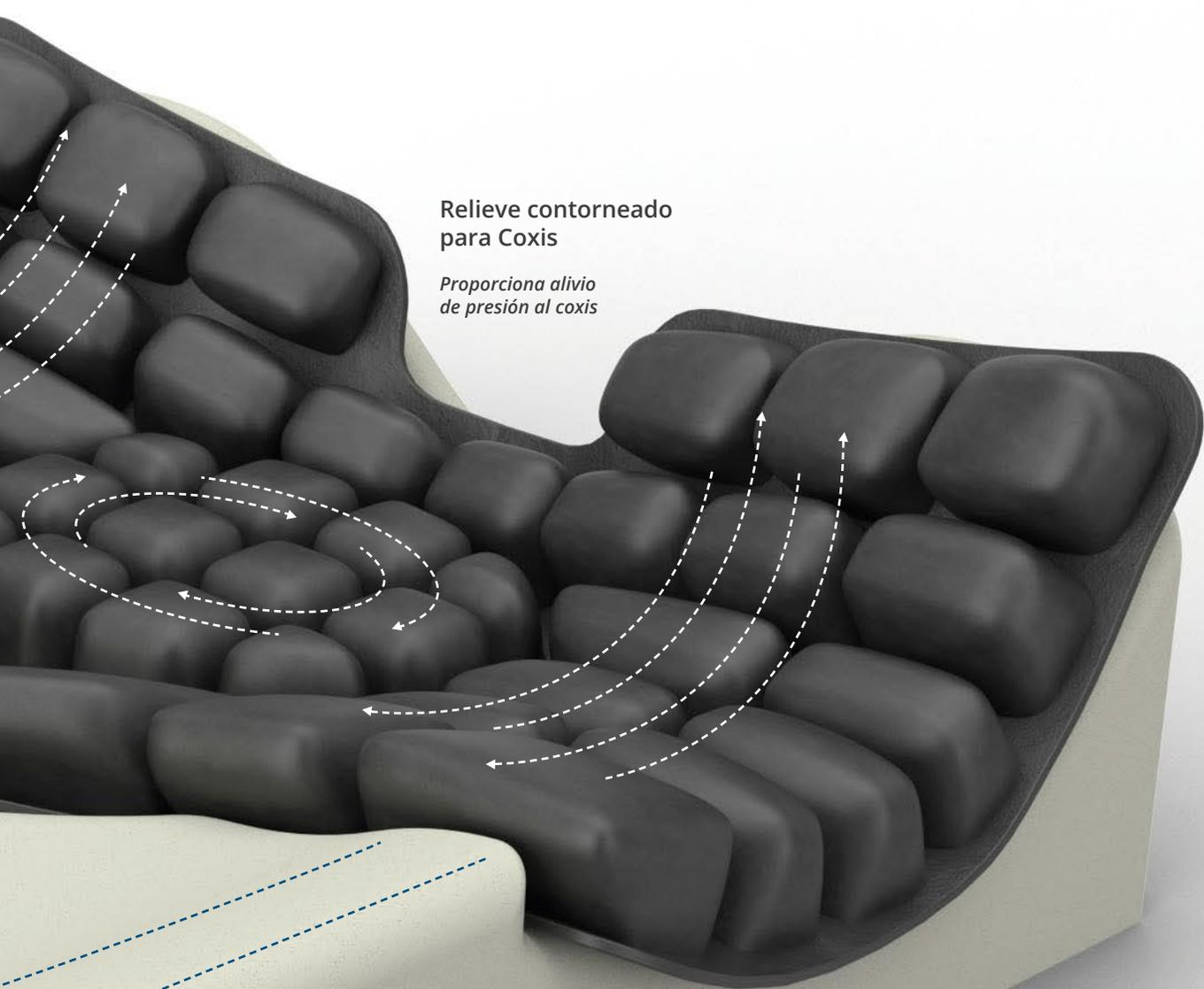

Relieve contorneado  
para Coxis

*Proporciona alivio  
de presión al coxis*

La hondonada pélvica usa  
la tecnología patentada de  
FLOTACION SECA ROHO®  
que proporciona una  
distribución hidrostática e  
inmersión de 3,2 cm

## Protección de la piel comprobada

---

Con Hybrid Select, experimente una estabilidad verdaderamente funcional, combinado una excelente protección para la piel y los tejidos blandos. El diseño contorneado del Hybrid Select permite que su pelvis esté inmersa en el aire y se mueva con usted, protegiendo su piel y tejidos blandos.

# Descarga de peso opcional de manera standard

A diferencia de otros almohadones, Hybrid Select proporciona una flexibilidad y tolerancia que facilita estar siempre en la posición correcta. Al retirar el inserto de aire de las tuberosidades isquiáticas (TI), Hybrid Select ofrece una técnica de descarga de peso opcional exclusiva.



Descarga  
de peso

*Inserto de aire  
para TI extraíble*



Hybrid Select ofrece el posicionamiento que necesito y me resulta más fácil hacer las transferencias.

— Eric  
Usuario de Permobil



## Especificaciones

<b>Tipo de cobertor</b>	Stretch-Air®
<b>Peso del producto</b>	1,45 kg*
<b>Límite de peso</b>	227 kg
<b>Garantía del almohadón</b>	36 meses, limitada
<b>Garantía de cobertura</b>	limitada de 6 meses

\* El peso del producto se basa en un cojín de tamaño 16 x 16. El peso del producto varía según el tamaño del almohadón.

## Opciones de tamaño

35,5 cm x 35,5 cm	40,5 cm x 40,5 cm	43 cm x 45,5 cm	51 cm x 40,5 cm
35,5 cm x 40,5 cm	40,5 cm x 43 cm	43 cm x 51 cm	51 cm x 43 cm
38 cm x 38 cm	40,5 cm x 45,5 cm	45,5 cm x 40 cm	51 cm x 45,5 cm
38 cm x 40,5 cm	40,5 cm x 51 cm	45,5 cm x 43 cm	51 cm x 51 cm
38 cm x 43 cm	43 cm x 40,5 cm	45,5 cm x 45,5 cm	
40,5 cm x 38 cm	43 cm x 43 cm	45,5 cm x 51 cm	

Fabricado por:

**permobil**

Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA  
 (011) 5365-8080 (+54911) 2328-6958  
 ventas@rehavita.com.ar www.rehavita.com.ar

**Reh&vita**