



**ORMESA®**  
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

**TRICICLETA**





# TRICICLETA

## Mejor equipada para divertirse de forma segura.

La **Tricicleta** de Ormesa es un dispositivo de asistencia para niños y adultos que tienen un discreto control del tronco y conciencia de su entorno.

La tricicleta **facilita el movimiento independiente**, con excelente adherencia al suelo y estabilidad.

La posición adelantada de la caja pedatera en relación al asiento y la altura de la columna de dirección y manillar, **facilitan el mantenimiento de una posición alineada** que a su vez, facilita el movimiento del pedaleo y la respiración.

Es modular: La **Tricicleta** puede adaptarse a las necesidades individuales de cada ciclista gracias a su diseño y a sus componentes ajustables que brindan soporte.



PRODUCT  
MARKED 

El TRICICLO 207 es un DISPOSITIVO MÉDICO que CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD definidos en el REGLAMENTO (UE) 2017/745

# Hecho para ti

## Tricicleta diseñada para todos:

4 colores disponibles 




Tam. 2  
207-2 small 14"



Tam. 3  
207-3 medium 16"




# Engranajes diferentes

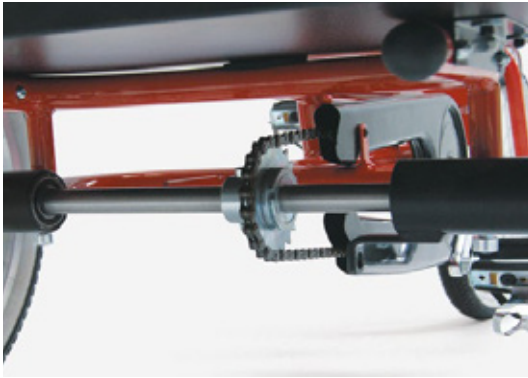

## Engranaje fijo y rueda libre

Dos configuraciones diferentes. El **piñón fijo** permite **pedaleo hacia atrás**, mientras que **las ruedas libres** son solo para **pedaleo hacia adelante**.

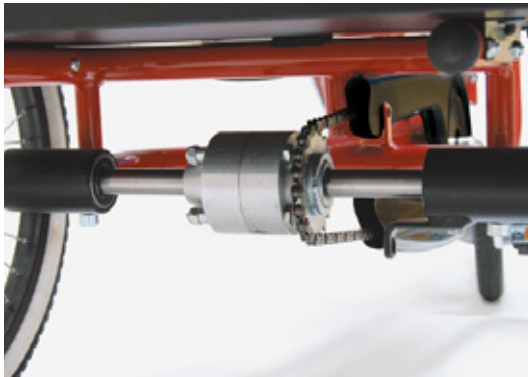

## Diferencial

Este diferencial **facilita enormemente los giros** al permitir que las dos ruedas traseras se muevan a la misma velocidad, con la rueda interior recorriendo una distancia más corta que el exterior.

## Modelos 207 3D, 4D, 5D

Bajo pedido, el triciclo se puede suministrar **con diferencial y rueda libre, engranajes o diferenciales y engranajes fijos** (solo tamaños 3, 4 y 5).







# Características técnicas y ajustes







## Freno frontal

Freno frontal operado por una palanca en el manillar derecho o izquierdo. La distancia entre el freno y la empuñadura es regulable mediante un tornillo.



## Sistema de bloqueo

Para subir y bajar de forma fácil y segura. Solo en tamaños 3, 4 y 5.



## Campana

Para advertir a otros que estás ahí.



## Luz

Por seguridad y control. Solo en tamaños 4 y 5.



## Canasto

Para las cosas llevar cosas importantes, en el sector trasero.



## Asiento ergonómico

Diseñado para el máximo confort. Altura ajustable.





## Guardabarros

La lluvia, el polvo y el barro no son un problema. Solo en tamaños 3, 4 y 5.



## Ruedas

De alto rendimiento, ligeras y resistentes a los golpes.



## Cuadro plegable

Para reducir el espacio durante el transporte. Solo en tamaños 2, 3, 4 y 5.




## Manubrio

Con ajustes de altura.



# Componentes

Los siguientes componentes posturales deben elegirse con el asesoramiento de un profesional de la salud que evalúe las capacidades del usuario. Siempre se requiere la supervisión de un adulto, familiar o persona calificada durante el uso del triciclo

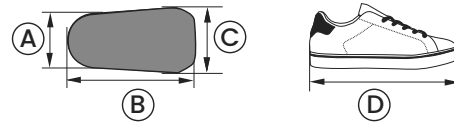

	841 tamaño de pie			longitud del zapato
	A	B	C	D
<b>tam. 1-2</b>	7 cm	16,5 cm	9 cm	18 a 21 cm
<b>tam. 3</b>	8,2 cm	20 cm	10,4 cm	21 a 24 cm



**840 Pedales con puntera**  
con correas, para mantener el antepié colocado en el pedal.



**923 Asistente adicional de empuje**







ORMESA

ORMESA

# TRICICLETA tamaños y peso

	tam. 2	tam. 3
A: ancho del manubrio	52 cm	60 cm
B: distancia entre ruedas	62 cm	66 cm
C: altura del pedal al asiento	de 46 a 62 cm	de 55 a 68 cm
D: desde el suelo hasta la cadena	30 cm	31 cm
E: longitud del cuadro	113 cm	135 cm
F: desde el suelo hasta el manubrio	de 81 a 95 cm	de 93 a 108 cm
G: ancho del triciclo plegado	73 cm	84 cm
I: altura del triciclo plegado	81 cm	95 cm
M: altura del usuario	de 90 a 120 cm	de 110 a 140 cm
Peso total	15 kg	18,5 kg
Carga máxima	45 kg	60 kg

\* ver componente 847 Palanca de pedal

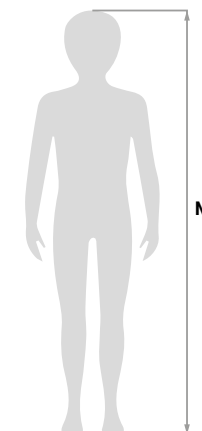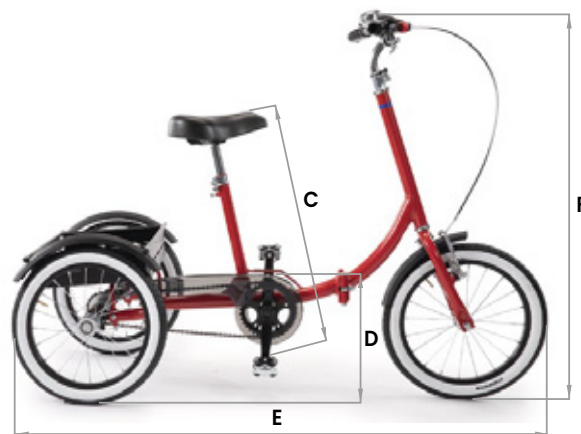






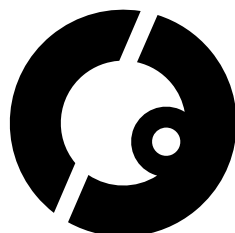








Pietro y su historia te esperan en la web oficial de Ormesa, junto con otros protagonistas de nuestra fantástica comunidad mundial.







Un agradecimiento especial a las familias que participaron, con entusiasmo en nuestro proyecto. Es gracias a nuestros clientes y sus historias que encontramos la energía y los estímulos para evolucionar día a día.

 complies with MDR (EU) 2017/745  
SISTEMA DE CALIDAD  
ISO 13485

[www.ormesa.com](http://www.ormesa.com)

Reh**h**avita®

 Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA  
 (011) 5365-8080  (+54911) 2328-6958  
 [ventas@rehavita.com.ar](mailto:ventas@rehavita.com.ar)  [www.rehavita.com.ar](http://www.rehavita.com.ar)