

Sillas de ruedas de titanio de alto rendimiento

# TiLite® TR | TiLite® ZR



permobil

# TiLite TR

La incorporación más reciente de la filosofía del diseño de doble tubo de TiLite donde más es igual a menos. Más tubos equivalen a mejor distribución de la carga gracias a la pared más delgada y más pequeña del Tubo de titanio de calidad aeroespacial con diámetro de 1".

El respaldo está disponible con configuración fija o plegable y cuenta con asiento ergonómico opcional

La posición fija del asiento es personalizada y se fabrica según las especificaciones del usuario

El centro de gravedad ajustable permite un equilibrio de desplazamiento perfecto

El diseño de doble tubo permite menos flexión del marco y una mejor transferencia de energía

El ángulo fijo del caster ahorra peso y mejora la capacidad de respuesta de la silla



# TiLite ZR

El diseño monotubo de 1,25" de diámetro del TiLite ZR es la combinación de la fuerza y sencillez. El cuadro fijo es diseñado según las especificaciones de cada usuario y utiliza Titanio de calidad aeroespacial para una resistencia y durabilidad inigualables.

El respaldo está disponible con configuración fija o plegable

Diseño personalizado y realizado según las especificaciones del usuario

La posición del asiento fija o ergonómica, es personalizada fabricada según las especificaciones del usuario

El ángulo fijo del caster ahorra peso y mejora la capacidad de respuesta de la silla

El centro de gravedad ajustable permite un equilibrio de desplazamiento perfecto



## Opciones de tattoo

- 1 Mosaic
- 2 Flower garden
- 3 Need for speed



1 2 3


## Colores del cuadro

### Pintura de alto brillo



TiLite Red Neón pink High gloss black

### Pintura metálica

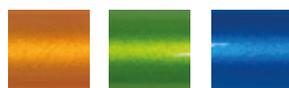


Tangerine metallic Acid green metallic Ocean blue metallic

### Pintura nacarada



Midnight blue pearl White pearl

### Pintura mate

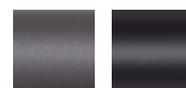

titanium grey Black lava

### Pintura caramelo



Ruby red Azure blue Plum electric

### Pintura texturada



Flame orange OD green Hyper blue

### Titanio natural



Satin Polished (CMD 87)

## Colores de los componentes

### Anodizado



Red Orange Blue Purple Green Gold Black

## Especificaciones

### TiLite TR

<b>Características del cuadro</b>	Titanio de doble tubo rígido, TiFit, Ajuste limitado	<b>Ajuste del centro de gravedad</b>	2.5 cm a 12.7 cm
<b>Ancho total de la silla*</b>	55.9 cm	<b>Respaldo plegable</b>	Altura ajustable 24.1 cm – 55.9 cm Ajuste de ángulo 80° – 101°
<b>Ancho del asiento</b>	30.5 cm – 50.8 cm	<b>Respaldo fijo</b>	Altura fija 12.7 cm – 50.8 cm Ángulo fijo 80° – 101°
<b>Ancho del frente del asiento</b>	0 cm, 2.5 cm, 5 cm, 7.6 cm	<b>Asiento ergonómico</b>	12.7 cm – 22.8 cm
<b>Profundidad del asiento</b>	30.5 cm – 50.8 cm	<b>Opciones de tránsito</b>	Bloqueo Q-Straint aprobado
<b>Altura anterior del asiento</b>	38.1 cm – 53.3 cm	<b>Peso de transporte*</b>	4.2 kg
<b>Altura posterior del asiento</b>	31.7 cm – 50.8 cm	<b>Límite de peso</b>	120 kg estándar 136 kg reforzada
<b>Ángulo frontal del marco</b>	70°, 75°, 80°, 85°, o 90°	<b>Garantía</b>	Cinco años para el cuadro Un año para los componentes TiLite
<b>Camber</b>	0°, 2°, 4°, o 6°		

### TiLite ZR

<b>Características del cuadro</b>	Monotubo Rígido de Titanio, TiFit, Ajuste limitada	<b>Ajuste del centro de gravedad</b>	0 a 6.3 cm
<b>Ancho total de la silla*</b>	58.4 cm	<b>Respaldo plegable</b>	Altura ajustable 24.1 cm – 55.9 cm Ajuste de ángulo 80° – 101°
<b>Ancho del asiento</b>	25.4 cm – 50.8 cm	<b>Respaldo fijo</b>	Altura fija 20.3 cm – 50.8 cm Ángulo fijo 80° – 101°
<b>Ancho del frente del asiento</b>	0 cm, 3.8 cm, 6.35 cm	<b>Asiento ergonómico</b>	12.7 cm – 22.8 cm
<b>Profundidad del asiento</b>	25.4 cm – 50.8 cm	<b>Opciones de tránsito</b>	Soporte de transporte
<b>Altura anterior del asiento</b>	40.6 cm – 53.3 cm	<b>Peso de transporte*</b>	4.2 kg
<b>Altura posterior del asiento</b>	31.7 cm – 50.8 cm	<b>Límite de peso</b>	120 kg estándar 136 kg reforzada
<b>Ángulo frontal del marco</b>	70°, 75°, 80°, 85°, o 90°	<b>Garantía</b>	Cinco años para el cuadro Un año para los componentes TiLite
<b>Camber</b>	0°, 2°, 4°, o 6°		

\* Pesos y anchos basados en una silla de 40.4 x 40.4 cm con camber de 0°, espacio mínimo entre las ruedas traseras y todas las características estándar. Las ruedas traseras no están incluidas en el peso de transporte. Como referencia, un par de ruedas traseras estándar de 24" pesan 3.2 kg.