

Sillas de ruedas ajustables de titanio

TiLite® TRA | TiLite® ZRA



permobil

TiLite TRA

El diseño de doble tubo del modelo TRA es una de las configuraciones del cuadro más avanzadas de TiLite. Diseñado para minimizar el peso y al mismo tiempo maximizar el desempeño. La ajustabilidad del centro de gravedad y respaldo, permiten al usuario experimentar un verdadero ajuste personalizado que alcanza a sus necesidades.

Diseño personalizado y realizado según las especificaciones del usuario, con asiento ergonómico disponible

Ángulo de asiento ajustable para maximizar la comodidad

Encuentra el equilibrio para la propulsión perfecta, con el centro de gravedad ajustable

La geometría de doble tubo proporciona mejor distribución de la carga y menor flexión del cuadro

Ángulo de la horquilla del caster ajustable, para asegurar un recorrido preciso



TiLite ZRA

El clásico diseño monotubo con un cuadro completamente ajustable. ZRA tiene un aspecto minimalista y refinado.

Diseño personalizado y realizado según las especificaciones del usuario, asiento ergonómico disponible

Ángulo de asiento ajustable para maximizar la comodidad

El centro de gravedad ajustable permite un equilibrio de propulsión perfecto

Tubo de 1,25" de diámetro que maximiza el rendimiento y minimiza el impacto visual

El ángulo de la horquilla del caster es ajustable, lo que asegura precisión en el movimiento




Opciones de tattoo


- 1 Mosaic
- 2 Flower garden
- 3 Need for speed



Colores del cuadro

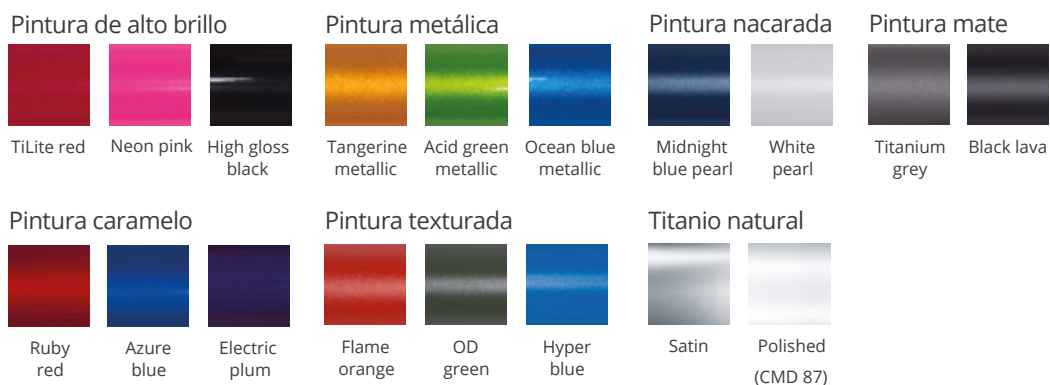

Colores de los componentes

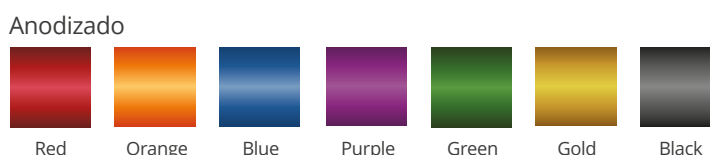

Especificaciones

TiLite TRA

Características del cuadro	Titanio de doble tubo rígido, TiFit, Totalmente ajustable	Ancho del asiento delantero**	0, 2.5, 5, 7.6 cm
Ancho total de la silla*	58.4 cm	Respaldo plegable	Altura ajustable 24.1 – 55.8 cm Ángulo ajustable 80° – 101°
Ancho del asiento	30.4 – 50.8 cm	Asiento ergonómico	15.2, 17.7, 20.3 cm
Profundidad del asiento	30.4 cm – 50.8 cm	Opciones de tránsito	Bloqueo Q-Straint aprobado
Altura anterior del asiento	38.1 cm – 53.3 cm	Peso de transporte*	5 kg
Altura posterior del asiento	33 – 53.3 cm	Límite de peso	120 kg estándar 158 kg reforzada
Ángulo frontal del marco	70°, 75°, 80°, 85°, o 90°	Garantía	Cinco años para el cuadro Un año para los componentes TiLite
Camber	0°, 2°, 4°, 6°, 8°, o 12°		
Ajuste del centro de gravedad	12.7 cm		

TiLite ZRA

Características del cuadro	Monotubo Rígido de Titanio, TiFit, Totalmente ajustable	Ancho del asiento delantero**	0, 3.8, 6.3 cm
Ancho total de la silla*	58.4 cm	Respaldo plegable	Altura ajustable 24.1 – 55.8 cm Ángulo ajustable 80° – 101°
Ancho del asiento	25.4 – 50.8 cm	Asiento ergonómico	15.2, 17.7, 20.3 cm
Profundidad del asiento	25.4 – 50.8 cm	Opciones de tránsito	Agarre de tránsito
Altura anterior del asiento	40.6 – 53.3 cm	Peso de transporte*	4.8 kg
Altura posterior del asiento	31.7 – 50.8 cm	Límite de peso	120 kg estándar 136 kg reforzada
Ángulo frontal del marco	70°, 75°, 80°, 85°, o 90°	Garantía	Cinco años para el cuadro Un año para los componentes TiLite
Camber	0°, 2°, 4°, 6°, 8° o 12°		
Ajuste del centro de gravedad	15.2 cm		

* Pesos y anchos basados en una silla de 40.4 x 40.4 cm con camber de 0°, espacio mínimo entre las ruedas traseras y todas las características estándar. Las ruedas traseras no están incluidas en el peso de transporte. Como referencia, un par de ruedas traseras estándar de 24" pesan 3.2 kg.

** Ancho del asiento delantero del cuadro.