

Sillas de ruedas
motorizadas

La fuerza de la bipedestación



permobil

Corpus VS

Las secuencias de bipedestación totalmente programables permiten optimizar la posición del usuario, para utilizar la posición supina, semi-reclinada o de bipedestación. Personalice aún más las posiciones de pie con el soporte ajustable de tronco, múltiples opciones de soporte para las rodillas y apoyapiés articulados eléctricos. El sistema de posicionamiento Corpus VS permite interacciones cara a cara y una bipedestación de confianza.



Diseñado para ser independiente

Los nuevos soportes de rodillas rebatibles, son un 75% más ligeros*, también cuentan con una función mejorada en comodidad y flexibilidad para el guardado de la silla.

** En comparación con el diseño original de soportes fijos.*



Mecanismo de liberación diseñado para un amplio rango de funcionalidad de la mano



Ajuste de precisión montado en el riel del asiento, para un cómodo guardado de la silla



Sistema de ajuste BOA® integrado para ajustes de precisión

BOA is a trademark of BOA.


Hechas para moverse

M Corpus VS suma bipedestación personalizada a la maniobrabilidad de la base de tracción central. Balanzas de suspensión DualLink con estabilidad, tracción, comodidad de marcha y junto con las otras características totalmente ajustables, amortiguadores de impacto que aseguran una experiencia de bipedestación y andar suaves.

Accesorios opcionales sin cargo en MCorpus VS y F5 Corpus VS:
Kit de luces LED, cargador USB, MyPermobil

- Opciones disponibles tanto en F5 Corpus VS como en M Corpus VS
- Opción disponible solo en la silla especificada

Velocidad funcional de conducción en bipedestación

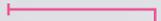

Bipedestación y Altura Activa de 30.5 cm

Secuencias de bipedestación totalmente personalizables

Opciones de soporte de rodilla rebatible o fijo



Bipedestación sin compromiso

5 Corpus VS combina todas las características de rendimiento de F5 Corpus con tracción delantera en su base y una funcionalidad superior de potencia de bipedestación. Con Suspensión Comfort Ride Pro™ independiente, completamente ajustable, amortiguadores de impacto que brindan lo último en confort de conducción mientras que optimizan la tracción y performance.

F5 Corpus VS Grupo 4 únicamente:
2 años de garantía. Plan de Mantenimiento Preventivo. Opciones de color hidrográfico incluidas. Cambio de color de la cubierta de una sola vez incluido.



Soporte para el pecho ajustable

Rango completo de inclinación eléctrica, reclinación y elevación del apoyapiernas

Bipedestación y Altura Activa de 35.5 cm

Alturas bajas y funcionales del asiento al suelo

Apoyapiés articulado

No necesita hardware adicional

Programación simplificada

Los cambios de programación son más rápidos e intuitivos con QuickConfig, la nueva aplicación de programación inalámbrica de Permobil para sillas de ruedas equipadas con Power Platform. Diseñado con médicos y proveedores de equipos, la aplicación facilita la personalización de secuencias de bipedestación, posiciones de memoria, y rendimiento de manejo. ¿El resultado? La configuración de la silla de ruedas nunca ha sido tan fácil.



Escanea para más información



Disponible para descargar desde la tienda de aplicaciones



Especificaciones

	M Corpus VS	F5 Corpus VS
Peso máximo del usuario	120 kg	136 kg
Velocidad máxima	9.6 km/h, Group 3	9.3 km/h, Group 3 12 km/h, Group 4
Autonomía	32 km*	32 km*
Ancho de la base	63.5 cm	64.7 cm
Longitud de la base	92.7 cm	109.2 cm
Radio de giro base	55.8 cm	76.2 cm
Altura del piso	7.6 cm	7.6 cm
Tipo de batería recomendada	Grupo 24	Group 24
Peso con baterías incluidas	192.3 kg	196 kg
Electrónica de accionamiento	R-net Power Platform 120A	R-net Power Platform120A
Altura del asiento al piso	44.5 cm, 47 cm, 49.5 cm	44.5 cm, 47 cm, 49.5 cm
Elevación del asiento	30.4 cm	35.5 cm
Rueda motriz	35.5 cm	35.5 cm
Ruedas	17.7 cm	20.3 cm
Opciones de tilt	Posterior: 0° - 50°	Posterior: 0° - 50°
Poder de bipedestación	Más de 70°	Más de 80°
Potencia del ángulo apoyapiernas	85° - 180°	85° - 180°
Ángulo del respaldo - reclinación eléctrica	85° - 180°	85° - 180°
Altura del respaldo	50.8 cm, 58.4 cm - 71 cm (1" incr.)	58.4 cm - 71 cm (1" incr.)
Profundidad del asiento	35.5 cm - 55.8 cm (1" incr.)	35.5 cm - 55.8 cm (1" incr.)
Ancho del asiento	43 cm - 58.4 cm (2" incr.)	43 cm - 8.4 cm (2" incr.)

* El rango de conducción real varía según las condiciones de conducción y de la batería. Las especificaciones pueden variar según la configuración. Consulte el manual de uso para conocer las instrucciones y advertencias para el funcionamiento seguro de su silla de ruedas.