

# erivo®

Silla de ruedas motorizada  
liviana y plegable



## Simple- mente móvil

Alber GmbH cuenta con más de más de 35 años de experiencia en el ámbito de la electromovilidad, siendo líder de mercado en dispositivos de motorización de sillas de ruedas. Es una compañía reconocida en el área de la salud, y que trabaja con distribuidores en todo el mundo.

## Estar ahí: Ser libre.

## Llegá lejos, llegá relajado con erivo

Tu compañero compacto para la vida diaria y viajes.

Ser independiente y autodeterminado, ir salir al aire libre con amigos, disfrutar del sol en el parque con la familia, irse de vacaciones con tu pareja: erivo de Alber te ayuda a mantenerte móvil y te ofrece una nueva calidad de vida. Erivo se pliega con solo un movimiento de muñeca y gracias a su tamaño compacto puede ser fácilmente trasladada en cualquier medio de transporte. Vuelve a soñar con destinos en lugar de preocuparte por el camino.



# elegante

## & práctica

### + erivo® diseño



En nuestro mundo cada vez más interconectado, lo que cuenta por encima de todo es la movilidad. Por eso necesitamos medios de transporte que se adapten a nuestro estilo de vida y nos ayuden a superar obstáculos. Ellos deben ser confiables, flexibles, fáciles de usar y, por supuesto, cómodos.



#### Buenas formas

Erivo tiene un andar dinámico y contemporáneo. Con su distinguida forma, combinación de colores y alta calidad materiales, establece nuevos estándares en diseño y garantiza una impronta elegante.

- ✓ Acabado en pintura bicolor color oro y negro mate
- ✓ Diseño de cuadro deportivo y resistente



### + erivo® con fort



#### El ajuste perfecto

Uno de los factores más importantes en una silla de ruedas motorizada es la comodidad del asiento. Erivo cuenta con una ergonomía bien pensada, los mejores materiales y mano de obra superior. La goma espuma de alta calidad asegura un sentado confortable y un soporte adecuado en todo momento.

- ✓ Ergonómico asiento firme y goma espuma de alta calidad
- ✓ Materiales transpirables



#### Sigue rodando

La eficaz suspensión de las ruedas traseras combinada con los neumáticos garantizan un excelente confort en el andar. Las grandes ruedas delanteras son antipinchaduras y ofrecen gran absorción y un soporte ideal para superar pequeños obstáculos.

- ✓ Suspensión y neumáticos grandes. 12 1/2" (31.7 cm) trasera
- ✓ Ruedas de PU antipinchaduras 8" delantero



# fácil & flexible


## + erivo® funcionalidad



### Tecnología de plegado inteligente

Con un movimiento de muñeca, erivo se pliega para ahorrar espacio. Es apenas más grande que una maleta pequeña, puede entrar en cualquier lado y acompañarte fácilmente en tu próximo viaje

- ✓ Se pliega con un movimiento de muñeca.
- ✓ Fácil almacenamiento y ahorro de espacio

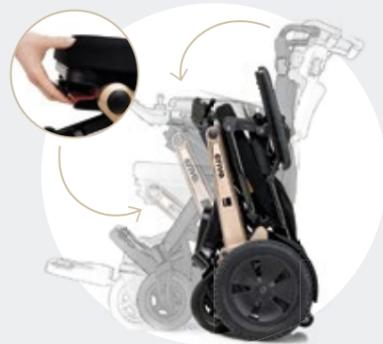

### Unidad de control, apoyabrazos y apoyapiés

Erivo ofrece la máxima flexibilidad con su joystick rebatible y sus apoyabrazos plegables. Este te permite acercarte a las mesas o cambiar de lugar con facilidad. El apoyapiés también se rebate y puede ajustarse en altura.

- ✓ Apoyapiés regulable en altura
- ✓ Apoyabrazos y unidad de control flexibles



### Batería

La potente batería está instalada debajo del asiento y puede ser retirada sin herramientas. Cuenta con cargador automático incluido. El nivel máximo de carga se alcanza en sólo 6 horas

- ✓ Máx. tiempo de carga: 6 horas
- ✓ Autonomía: 17 a 35 km/h



## + erivo® dinamismo



### Control intuitivo

El joystick intuitivo ofrece un recorrido variable y preciso control de velocidad. Permite moverse con seguridad en espacios reducidos, así como jugar a la mancha con sus nietos en el parque.

- ✓ Control preciso y ágil
- ✓ Selección de velocidad continua (1 a 4 mph)



Control asistente opcional



# Usa erivo diaria- mente y continúa con tu pasión por los viajes

## Recupera tus lugares favoritos.

Erivo ayuda no sólo en la vida cotidiana. Su tamaño compacto lo hace portátil en cualquier medio de transporte, y es el compañero ideal para el próximo viaje. Ya sean unas vacaciones familiares planificadas desde hace mucho tiempo o un viaje espontáneo con amigos: usted y su erivo siempre estarán ahí para vivir la experiencia. Y si la batería de larga duración se agota, no es necesario preocuparse: Erivo vuelve a cargarse completamente en solo 6 horas y está listo para funcionar.



auto



avión



barco



micro



trailer



tren



Sé libre.

## Experiencia Erivo

Con solo un movimiento de muñeca, Erivo se pliega y puede viajar fácilmente en cualquier medio de transporte, también se despliega con la misma facilidad cuando sea necesario. Descubre nuevas áreas o disfruta de tu lugar favorito sin preocupaciones con la comodidad de su asiento, garantizado por la suspensión, las grandes ruedas traseras con neumáticos y el asiento ergonómico. Erivo proporciona una gran experiencia.



alber

Simply mobile.

erivo.

# + erivo® descripción general

## Unidad de control giratoria

Permite acercarse a la mesa



## Tecnología de plegado inteligente

Dimensiones plegadas (ancho x alto x profundidad) 63.5 x 86.3 x 53.3 cm

## Batería

Autonomía de 17 a 35 km/h y carga rápida

## Apoyabrazos plegables

Facilitan el sentado y ponerse de pie



## Apoyapiés

Ajustable en altura y rebatible

## Joystick

Control intuitivo mediante joystick con control de velocidad continuo de 1.6 km/h a 6.4 km/h

## Mejor conducción

Ruedas frontales grandes de PU de 8" a prueba de pinchaduras. Llantas neumáticas y suspensión en las ruedas traseras

## Asiento ergonómico

Asiento firme / contorneado. Transpirable, realizado con materiales de alta calidad.

## Diseño innovador

Marco elegante y deportivo en colores dorado y negro mate



**erivo®**  
La silla de ruedas motorizada ligera y plegable

## Información técnica

**Peso de envío**  
(batería extraída) 27.2 kg

Batería estándar  
peso del paquete: 2.4 kg

Batería de repuesto  
peso del paquete: 4.5 kg

### Capacidad de la batería

Batería estándar: 11.0 Ah

Reemplazo opcional  
de baterías: 30.15 Ah

Ancho del asiento: 45 cm

Profundidad del asiento: 47 cm

Altura del respaldo: 50 cm

Altura del asiento: 50.8 cm

Longitud total: 39.5 cm

Potencia de salida: 250 w

Peso máximo del usuario: 149.6 kg

**Clase de protección:** IPX4  
(protegido contra pinchaduras)

