

Permobil

M1



permobil

Pura libertad

M1 es una silla de ruedas motorizada fiable y duradera con un asiento de baja altura, tres opciones de función eléctrica y apoyabrazos abatibles con bloqueo. El sistema de las baterías Permobil permite un uso seguro y cómodo para llegar donde necesite.

Opciones de respaldo de calidad

Elija entre diferentes opciones de posicionamiento que se adaptan a un respaldo tubular desde un respaldo curvado simple, hasta los más avanzados, como Comfort Acta-Back®, Acta-Relief™ y ROHO® AGILITY® Max Contour.

Mayor maniobrabilidad

La nueva batería de Permobil y el cargador Permobil VoltPro funcionan juntos para proporcionarle hasta un 25 % más de distancia de conducción, tiempos de carga optimizados y una mayor vida útil de la batería.

Reclinación eléctrica

La reclinación eléctrica cambia el ángulo del respaldo con solo pulsar un botón. Esto redistribuye la presión para aumentar el confort y la tolerancia al sentarse, a la vez que facilita la adopción de una posición relajante.

Basculación eléctrica

La opción de basculación eléctrica permite inclinar el asiento hasta 50° para favorecer una posición de reposo, o una distribución de la presión. La inclinación también puede utilizarse para mejorar la comodidad, la estabilidad del tronco y la postura de la cabeza.

Soporte eléctrico para las piernas opcional


Ofrece la posibilidad de cambiar de posición fácilmente para una mayor comodidad. También puede contribuir a mejorar la circulación en las extremidades inferiores.

Maniobrabilidad cómoda y fiable

La suspensión Smooth ayuda a reducir las vibraciones y el centro de gravedad bajo con tracción en las ruedas centrales permite un uso cómodo durante más tiempo. El asiento adaptable se amolda a los cambios posturales o funcionales con el paso del tiempo.

Compacto y transportable

Un tamaño compacto y una opción de respaldo plegable con la función EZ-fold que permite ahorrar espacio al guardar o transportar su M1.

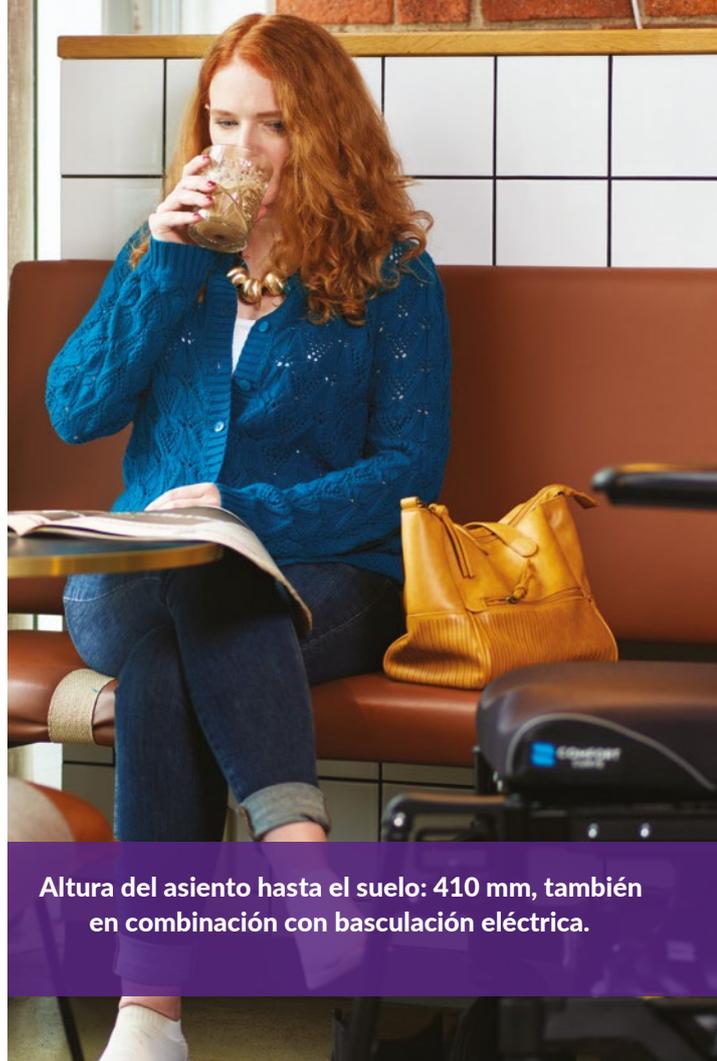

Altura del asiento hasta el suelo: 410 mm, también en combinación con basculación eléctrica.



La reclinación eléctrica de 85-130°, redistribuye la presión para aumentar el confort y la tolerancia al sentarse.

Especificaciones de la M1

Velocidad máx.	8 km/h (modelo opcional de 6 km/h)
Autonomía (baterías G34: 65 Ah)	40 km*
Peso máximo del usuario	136 kg
Ascenso de obstáculos (con tiempo de arranque)	5 (7,5 cm)
Diámetro de giro mínimo	112 cm
Ancho de giro	110 cm
Suspensión	<i>Smooth</i>
Electrónica	VR2 90A (opción RNET 90A)
Anchura con asiento	61-79 cm
Altura	97-117 xm
Longitud/altur de almacenaje	67 mm/82 cm
Peso con baterías 65 Ah	144 kg
Altura del asiento hasta el suelo (sin cojín)	41 cm
Opciones de altura del asiento (sin cojín)	41 cm; 43.5 cm; 46 cm
Anchura del asiento y del respaldo**	36-56 cm (en incrementos de 5 cm)
Profundidad del asiento	36-56 cm (en incrementos de 2.5 cm)
Altura del respaldo (sin cojín de asiento) con anchura del asiento de 360 mm	45.5-64 cm (en incrementos de 2.5 cm)
Altura del respaldo (sin cojín de asiento) con anchura del asiento >360 mm	55.5-74 cm (en incrementos de 2.5 cm)
Altura del reposabrazos	18-36 cm
Distancia entre los reposabrazos	38-48 / 48-58 cm
Ajuste del ángulo del respaldo (manual)	85°-110°
Ajuste del plano del asiento - Inclinación anterior/posterior	De 90° a 140°
Prueba de colisión según la ISO 7176-19 - 4 puntos de anclaje	Sí, máx. 136 kg de peso del usuario
Probada conforme a las normas EN12182/EN12184	Sí

Personalice su viaje

SUNBURST ORANGE

RADIANT RED

POWER PINK

GALACTIC GREEN

OCEAN BLUE

MIDNIGHT BLACK



Reclinación eléctrica
85 - 130°



Basculación posterior
0 - 50°



Reposapiés eléctrico
80°-140°
(>480 mm de profundidad del asiento)
90°-150°
(≤480 mm de profundidad del asiento)
Soporte para las piernas manual
80°-135°



Soporte para las piernas abatible
100°-115°
con ajuste manual
y desmontable



Respaldo Acta
Opcional
Sistema de alivio
Acta
ROHO Agility Max
Respaldo macizo
curvado

Altura del
asiento desde el
suelo 410 mm

Ancho de la base
61 cm

Longitud máx. incl. asiento
99 cm

*Condiciones de conducción y elección del tipo de batería.

** Respaldo tubular.

Las mediciones son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Permobil M1
está diseñada
con énfasis en la
facilidad de uso y
la durabilidad.

Permobil M1

La fiabilidad está garantizada con la tecnología probada de la unidad de accionamiento que también se encuentra en las series de sillas Permobil M3 y Permobil F3. La exclusiva geometría de suspensión y el diseño ineal, proporcionan un chasis más estable, mientras que la suspensión amortigua las vibraciones y garantiza una conducción más suave sobre diferentes superficies.

